



95809 NL

- 1 Mondstuk
- 2 Display
- 3 Waterreservoir
- 4 Oplaadpoort

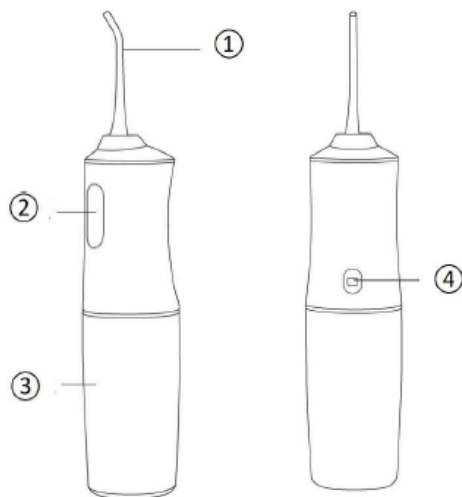

Aan/Uit-knop
en modusselectie

Modusweergave

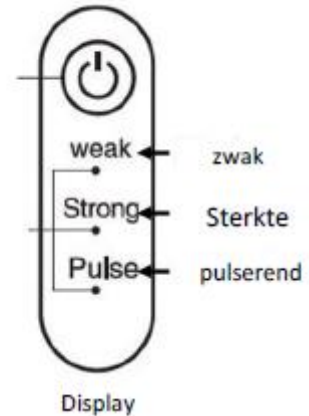

1. Standaard mondstuk voor dagelijkse reiniging
2. Tongreinigingsmondstuk
3. Orthodontisch mondstuk voor het reinigen van beugels
4. Borstelmondstuk voor grondige reiniging tussen de tanden en tegen tandplak.



Waarschuwing: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het instrument gebruikt en bewaar deze voor latere referentie.

A. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.

2. Voordat u het apparaat aansluit, controleer of de elektrische spanning op uw locatie overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, dompelt u de netkabel, stekker of andere delen van het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is aangesloten.
5. Raak de stekker niet aan met natte handen.
6. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
7. Als u de kabel loskoppelt, trek deze dan altijd aan de stekker, niet aan de kabel zelf.
8. Laad de apparaat niet op als de stekker of de netkabel beschadigd is, als deze niet goed functioneert of als u deze heeft laten vallen.
9. Probeer nooit om het apparaat zelf te repareren. Laat het altijd repareren door een gekwalificeerd servicecentrum of reparatiecentrum.
10. Het stroomkabel moet regelmatig worden gecontroleerd om schade te voorkomen. Als de netkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerd reparatiecentrum om gevaar te voorkomen.
11. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren om vervorming van de kunststofonderdelen te voorkomen.
12. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om brandgevaar te voorkomen.
13. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
14. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die eerder instructies heeft ontvangen over het gebruik van dit apparaat. Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
15. De mondstukken van dit apparaat zijn breekbaar. Wees uiterst voorzichtig bij het reinigen van het apparaat om verwondingen te voorkomen.
16. Dit apparaat, met name de mondstukken, moet vóór en na elk gebruik worden gereinigd, omdat het direct in contact komt met uw mond.
17. Verplaats het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.
18. Laad het apparaat niet op in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of zwembad. Als het apparaat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in water valt, trek dan altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het uit het water haalt.
19. Schakel het apparaat na elk gebruik uit.
20. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
21. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, omdat de batterij beschadigd kan raken of kan exploderen.
22. Gebruik het apparaat niet met water dat warmer is dan 40°C.

23. Gebruik het product uitsluitend met water.

24. Dit product is niet bedoeld voor het uitspoelen van tandpasta.

25. Personen met tandproblemen moeten voor gebruik van het product advies inwinnen bij hun tandarts.

26. Personen die recentelijk een tandheelkundige ingreep hebben ondergaan, moeten voor gebruik van het product advies inwinnen bij hun tandarts.

27. Na langdurig niet-gebruik moet u de mondstukken en de container grondig reinigen om bacteriegroei te voorkomen.

B. GEBRUIK

1. Plaatsen en/of vervangen van de batterij


- Open de batterijklep aan de achterkant van het apparaat.

- Steek de stroomkabel in de laadpoort.


- Plaats de batterijklep terug op de laadpoort zodra het opladen is voltooid. Zorg ervoor dat de klep goed gesloten is om ervoor te zorgen dat het product waterdicht is.

- Tijdens het opladen knipperen de indicatorlampjes op het bedieningspaneel. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, blijven de lampjes constant branden.


2. Inschakelen

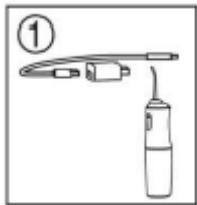

Laad het apparaat volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt.

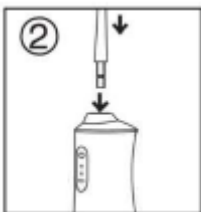


Plaats de juiste mondstuk in de daarvoor bestemde houder bovenop het apparaat. Als u moeite heeft met het plaatsen van het mondstuk, draai het dan voorzichtig in de houder (360°) om het te bevestigen. Om het mondstuk na gebruik te verwijderen, trek het dan uit de basis (als u het omhoog trekt, kan het mondstuk beschadigd raken), terwijl u het apparaat stevig vasthoudt.

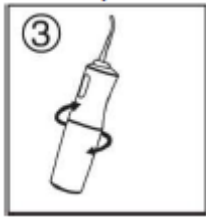

Draai de watertank met de klok mee en trek hem vervolgens naar beneden om hem te openen. Let op de maximale waterstand die op de watertank is aangegeven.



Vul uw tank. Sluit de container goed af door hem met de klok mee te draaien.


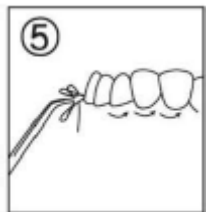


Plaats het mondstuk in de richting van het gebied dat u wilt reinigen. Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop te drukken. Het apparaat wordt standaard ingeschakeld in de lagedrukmodus. Om de volgende modus te selecteren, drukt u opnieuw lang op de knop voor de krachtige modus en vervolgens nogmaals lang voor de pulserende modus. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u kort op de aan/uit-knop, ongeacht in welke modus het apparaat zich bevindt (het apparaat schakelt automatisch uit als het 2 minuten lang niet wordt gebruikt zonder op de aan/uit-knop te drukken).

3. Methode voor het reinigen van de tanden:

Es wordt aanbevolen om, afhankelijk van uw behoeften en comfort tijdens het gebruik, geleidelijk over te schakelen van de lage modus naar de hoge modus en vervolgens naar de pulserende modus. Als er tijdens het gebruik van de sterke of pulserende modus pijn optreedt, schakel dan terug naar de lage modus. Het wordt aanbevolen om de mondstukkop tussen het tandvlees en de tand te positioneren en de mond wijd open te houden, zodat het water goed kan circuleren. Met deze positie kunt u de modus kiezen die u bevalt (voor de eerste toepassingen wordt sterk aanbevolen om de lage modus te kiezen)

Richt het mondstuk op het tandvlees en begin met het achterste deel van uw mond, totdat het tandvlees van de laatste tand is gespoeld. Draai vervolgens het mondstuk om, richt het op het tandvlees en ga op dezelfde manier door met spoelen aan de achterkant van de tanden. Herhaal dezelfde beweging in de tegenovergestelde richting, zoals de schema's hieronder, van 1 tot 4.

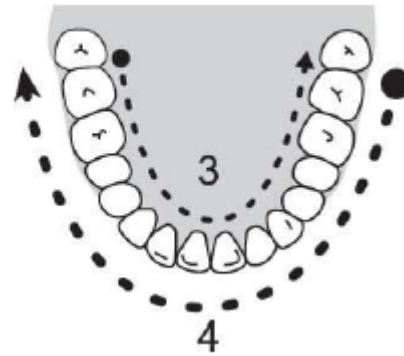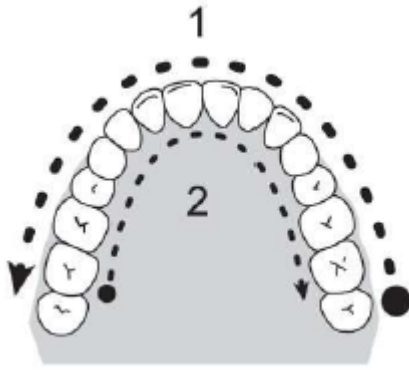

De mondstukken moeten niet naar de ruimte tussen het tandvlees en de tanden worden gekanteld, maar naar de interdentale ruimtes, zoals hieronder weergegeven in de afbeeldingen:



Goede positie



Slechte positie

C. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen schurende materialen. Reinig en spoel in lauw zeepwater en droog af met een zachte doek. Spoel het water na het reinigen grondig af om te voorkomen dat er reinigingsmiddel achterblijft op de mondstukken of in de container.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: ABS
- Batterij: 1200 mAh / 3.5W
- Reservoir: 220 ml

Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recycleren van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:
 - Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
 - Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meng nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatiecentrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.



Importiert von / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported
by: CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

