

**AT51006 / AT51006R**

**ROLLATOR  
GEBRAUCHSANWEISUNG**

**INSTRUCTION MANUAL ROLLATOR**

**DÉAMBULATEUR EN ALUMINIUM,  
À QUATRE ROUES**

**ALUMINIUM ROLLATOR, VIERWIELIG**



v.ins.PL-085.1 - 27.02.2018



**OPMERKING:** Alle onderdelen moeten worden geïnspecteerd op transportschade. Als u dergelijke schade opmerkt, mag u het product NIET gebruiken. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

#### **AANBEVELINGEN, DE HANDHAVING VAN DE VEILIGHEID**

Om de veiligheid bij het gebruik van de rollator te waarborgen, moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:

##### **EEN ALGEMENE WAARSCHUWING**

Monteer en gebruik het product NIET voordat u deze handleiding leest en begrijpt. Als u de waarschuwingen, opmerkingen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met uw arts, distributeur of technisch personeel voordat u het product probeert te monteren om letsel of schade aan het product te voorkomen. Elke gebruiker moet zijn of haar arts of therapeut vragen om de juiste aanpassingsvariant en het gebruik ervan te bepalen.

De rollator is niet bedoeld voor de gebruiker om de rollator te bedienen terwijl hij erop zit.

Bij het instellen van de hoogte van de rollator moet een arts/therapeut aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gebruiker wordt ondersteund en dat de remmen correct zijn afgesteld en de schroeven zijn aangedraaid.

Wanneer de rollator is uitgeklaapt, moet u er altijd op letten dat de buis op de zitting vergrendeld is en goed met het frame is verbonden, en dat de remkabel in de zijbuis zit en er stevig aan vastzit. Controleer de remkabel na elke hoogteverstelling om losraken van de kabel te voorkomen. Zorg ervoor dat de knoppen vergrendeld zijn zodat de hoofd draagconstructie niet kan bewegen als gevolg van druk. Het snelspanmechanisme moet op zijn plaats worden gemonteerd en moet in de ontgrendelingspositie blijven staan, zelfs als er sterk aan wordt getrokken in de omgekeerde richting. De koperen pennen in de controlebuis steken uit naar rechts. Doet u dit niet, dan kan dit tot verwondingen leiden. Controleer voor gebruik of ALLE handgrepen en zitverstelementen vastzitten en of de wielen en bewegende delen van het product in goede staat zijn.

ALLE wielen moeten altijd volledig in contact met de grond staan om de stabiliteit van de rollator te waarborgen.

VOORDAT de gebruiker op de stoel zit, MOETEN de remmen in de vergrendelstand staan.

Wanneer de rollator stationair wordt gebruikt, MOETEN de handremmen in de vergrendelstand staan.

##### **WAARSCHUWINGEN: OPGELET DE STABILITEIT VAN HET PRODUCT**

De maximale belasting van het balkon is 125 kg, inclusief de inhoud van de bagage. De maximale belasting van de bagagemand is 5 kg.

##### **WAARSCHUWINGEN: OPGELET MONTAGE**

Wanneer de rollator is uitgeklaapt of gemonteerd, zorg er dan voor dat de zitting met bouten en moeren in beide buizen en beide handgrepen in het hoofdsteunframe is vergrendeld. Zorg er ook voor dat de koperen pennen uit de juiste gaten in de wielbuizen glijden en goed vergrendeld zijn, en dat beide handgrepen op dezelfde hoogte zijn en niet bewegen.

##### **WAARSCHUWINGEN: OPGELET INSTALLATIES**

Zorg ervoor dat de zadelsluiting goed vastzit in het slot, dat alle koperen pennen uit hun respectievelijke gaten glijden en dat de voor- en achterste buizen stevig in het hoofdframe worden gestoken en met knoppen worden vastgezet.

Controleer voor gebruik altijd of het balkon en de onderdelen ervan goed vergrendeld zijn.

#### **UITKLAPBAAR/OMKLAPPEN VAN DE ROLLATOR**


**OPMERKING:** Raadpleeg de WAARSCHUWINGEN VAN TOEPASSINGEN voor meer informatie.

**CONSTRUCTIES/Montage** in de AANBEVELINGEN VAN VEILIGHEID in deze handleiding.

Til de hendel van de zitting op om de rollator op te klappen, zoals aangegeven in de afbeelding.

Schroef vervolgens de schroeven in om de voorwielen en de beide buizen voor de achterwielen uit te lijnen.

##### **UITKLAPPEN**

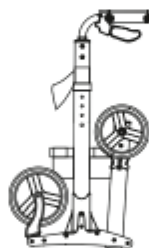

#### **INSTELLEN VAN DE HANDREMSEN**


**OPMERKING:** Raadpleeg de WAARSCHUWINGEN VAN TOEPASSINGEN voor meer informatie.

**INSTALLATIES** IN AANBEVELINGEN VAN VEILIGHEID in deze handleiding.



## INKLAPPEN

Til de hendel op om de rollator te vouwen volgens afb.

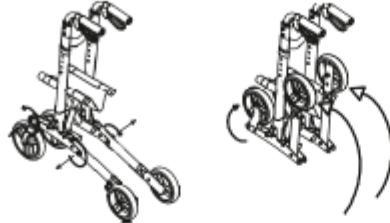

## GEBRUIK/BLOKKEREN VAN HANDREM MEN

OPMERKING: Raadpleeg de WAARSCHUWINGEN VAN TOEPASSINGEN voor meer informatie. | NSTALLATIES IN AANBEVELINGEN VAN VEILIGHEID in deze handleiding.

WAARSCHUWING: Bij gebruik en bediening van de rollator en bij het inklappen en afstellen van de mechanismen kan het risico bestaan dat de lichaamsdelen van de drager/begeleider in de openingen/sleuven tussen de onderdelen bekneld raken. Voer deze handelingen met bijzondere zorg uit.

Nadat de afstelling is voltooid, stabiliseert u de positie door de moeren/schroeven aan te draaien.

## GEBRUIK VAN HANDREM MEN

1. Trek de rem in de richting van de handgrepen.
2. Een van de volgende handelingen te verrichten

A. BIJ STIL STAAN - houd de remhendel omhoog;

B. STOP - Laat de remhendel los

## BLOKKEREN VAN HANDREM MEN


Duw het onderste deel van de remhendel naar beneden tot u een klik hoort (fig. 6).

Voor meer informatie, zie de sectie BLOKKEREN VAN DE HANDREM MEN van deze handleiding.

Afb. 5 (ontgrendeld)



Afb. 6 (vergrendeld)

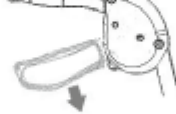

## ONTGREDELING VAN DE HANDREM MEN

Trek de remhendels naar boven totdat ze worden gelost, zoals weergegeven in figuur 5.

Laat de remhendel los.

Zorg ervoor dat de remkabel langs de zijbuis loopt en dat het ongebruikte deel aan de voorzijde van de rollator wordt opgerold.

## ONDERHOUD

1. Zorg ervoor dat alle hulpstukken altijd beschermd zijn.
2. Controleer de schroef waarmee de zitting aan de zijpanelen wordt bevestigd. Indien nodig vastdraaien.
3. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.

## WIELONDERHOUD

1. Reinig de wielen met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Droog met een droge doek.
2. Smeer periodiek met 3-in-1 vet als de wielen beginnen te piepen.

## Technische parameters

Een vierwielige, aluminium, opvouwbare rollator.

Gewicht: 7,35 kg

Hoogte: 79,5 - 92,5 cm

Diameter voor wielen 8", achter 7"

Zadel hoogte: 53,5 cm

Breedte tussen handvaten: 46,5 cm

Zadel lengte: 46 cm

Zadel breedte: 20 cm

Afstand tussen de voorwielen: 59 cm

Afstand tussen de voor- en achterwielen: 51 cm

Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg.



## Garantie-Kaart

Model: .....

Serienummer: .....

Stempel van verkooppunt  
en een leesbare handtekening van de verkoper .....

1. ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, Zawislanska 43 verleent hierbij 12 maanden garantie op het product vanaf de datum van uitgifte aan de koper. Voor producten waarvan de aankoop door het Z.V is vergoed, geldt de verlengde garantieperiode gelijk aan de helft van de gebruiksperiode die is vastgelegd in de regeling inzake gegarandeerde voordelen, mits de gebruiksperiode in maanden of jaren is vastgelegd in de regeling.
2. Tijdens de garantieperiode verbindt ANTAR zich ertoe de nodige reparaties uit te voeren om de set binnen 14 dagen na ontvangst door het servicecentrum van de teruggenomen goederen, samen met het aankoopdocument en de garantiekaart, weer naar behoren te laten functioneren.
3. ANTAR behoudt zich het recht voor het product te vervangen indien zij van mening is dat de reparatiekosten het product onrendabel maken. Reparatie of vervanging van een defect product verlengt de garantieperiode niet.
4. Als u vindt dat het product niet naar behoren functioneert, stuur het dan onmiddellijk naar het adres van ANTAR (vermeld in punt 1) of neem contact op met het punt waar de aankoop is gedaan.
5. Lees de bedieningshandleiding en volg deze strikt op voordat u met de bediening begint. Als het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel en de aanbevelingen, vervalt de garantie onherroepelijk.
6. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door punctie of snijden van het product met een scherp voorwerp, schade veroorzaakt door externe mechanische krachten, contact van het product met spiritus, vet of olieachtige stoffen, benzine.
7. Het product dat in het kader van de klacht naar de dienst wordt gestuurd, mag geen epidemiologische bedreiging vormen.
8. DIT GARANTIEBEWIJS IS ENKEL GELDIG SAMEN MET HET AANKOOPBEWIJS (ONTVANGSTBEWIJS, FACTUUR). BIJ ELKE KLACHT DIEN T U HET AANKOOPBEWIJS BIJ TE VOEGEN. OM DE VERLENGDE GARANTIEPERIODE TE ERKENNEN VOOR HULPMIDDELEN WAARVOOR DE AANKOOP DOOR DE Z.V IS VERGOED, MOET EEN KOPIE VAN HET "CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN ORTHOPEDISCHE MEDISCHE HULPMIDDELEN" WORDEN BIJGEVOEGD.
9. Klachten die zonder aankoopbewijs en garantiekaart met het serienummer van het product worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.



**ANTAR Sp. J.**  
ul. Zawislanska 43  
03-068 Warszawa,  
TEL: +48 22 518 36 00  
FAX: +48 22 518 36 30  
E-mail: antar@antar.net  
[www.antar.net](http://www.antar.net)

